

Приложение № 3  
 к приказу Министерства здравоохранения  
 Свердловской области  
 от 18.04. 2020 № 634-и

**Алгоритм надевания средств индивидуальной защиты**

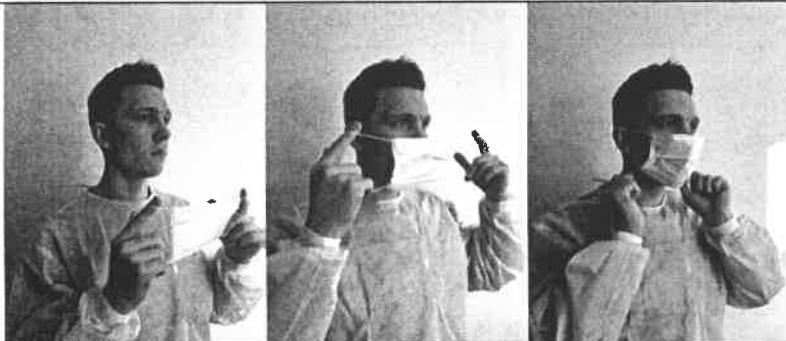
1. Надеть защитную одежду (хирургический халат/комбинезон);
2. Надеть защиту органов дыхания (медицинскую маску/респиратор);
3. Надеть защиту глаз (очки/щиток);
4. Надеть шапочку;
5. Обработать руки спиртовым антисептиком;
6. Надеть перчатки.

**Надевание халата**

	<p>Достаньте хирургический халат из индивидуальной упаковки;</p>
	<p>Разверните хирургический халат к себе внутренней стороной;</p>

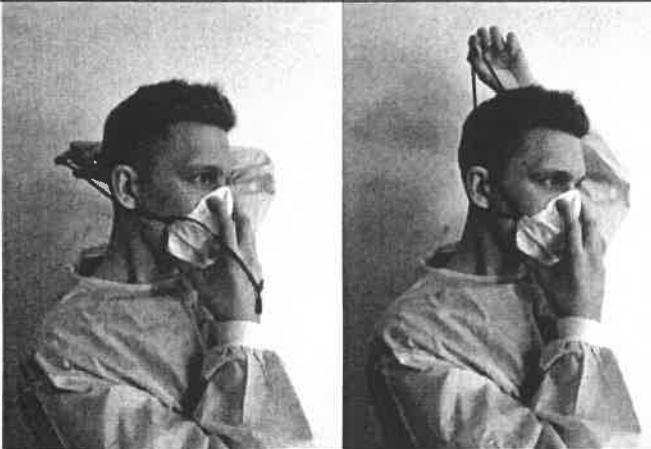
	Наденьте хирургический халат;
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

### Надевание медицинской маски

	Обработайте руки спиртосодержащими кожными антисептиками. Держите медицинскую маску креплениями ушных петель наружу.
	Убедитесь в удобном прилегании фиксатора для носа на переносице. Расправьте специальные складки на маске. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу.

### Надевание респиратора

	Провести гигиеническую обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками. Чистыми руками вскрыть упаковку. Проверить целостность респиратора на наличие дефектов.
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Приложить респиратор к лицу.
	Завести эластичные ремни крепления за голову, отрегулировать ремни крепления и закрепить их на уровне теменной и затылочной части головы.
	Обжать пластину носового зажима на переносице.
	Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками.

**Положительный тест на герметичность** Быстро выдохнуть. Внутри респиратора создается положительное давление. В случае пропускания, поправьте положение респиратора и/или натяжение тесемок. Повторите проверку еще раз. Повторяйте, пока респиратор не будет сидеть герметично.

**Отрицательный тест на герметичность** Сделать глубокий вдох. Если респиратор не пропускает, отрицательное давление прижмет его к лицу. Пропускание ведет к снижению отрицательного давления внутри респиратора за счет попадания воздуха через щели/зазоры.

#### Надевание защитных очков



Наденьте защитные очки

#### Надевание перчаток



Наденьте перчатки поверх рукавов халата

#### Надевание шапочки



Наденьте шапочку